



Bloedsuikerwaarde meten



1 Was je handen met zeep en droog ze goed af.



2 Verwijder de dop van de prikpen.



3 Plaats de naald in de prikpen en draai het beschermkapje van de naald.



4 Plaats de dop terug op de prikpen totdat je een klik hoort. Je ziet nu het getal 3.



5 De prikpen kun je op prikdiepte instellen door aan de dop te draaien. Hoe hoger het getal, hoe dieper de prik van de naald.



6 Druk op het uiteinde van de prikpen om de pen op spanning te zetten.



7 Er verschijnt een geel venster. De prikpen is nu klaar voor gebruik.



8 Pak een teststrip en plaats de strip in de meter. Het gele uiteinde moet zichtbaar zijn.



Bloedsuikerwaarde meten



9

De meter gaat aan wanneer de strip is geplaatst. Je ziet een knipperende druppel.



10

Neem de prikpen en prik in de bovenkant of zijkant van je vinger. Gebruik steeds een andere vinger.



11

Wrijf van beneden naar boven over je vinger om een bloeddruppel te krijgen.



12

Houdt de teststrip rechtop in de bloeddruppel. De bloeddruppel wordt in de teststrip gezogen.




13

De onderkant van de strip moet helemaal rood zijn voor een goede meting. De bloedsuikerwaarde komt in het scherm te staan.



14

Bij te weinig bloed in de strip kom er 'Error' in het scherm te staan. Verwijder de teststrip en begin opnieuw.

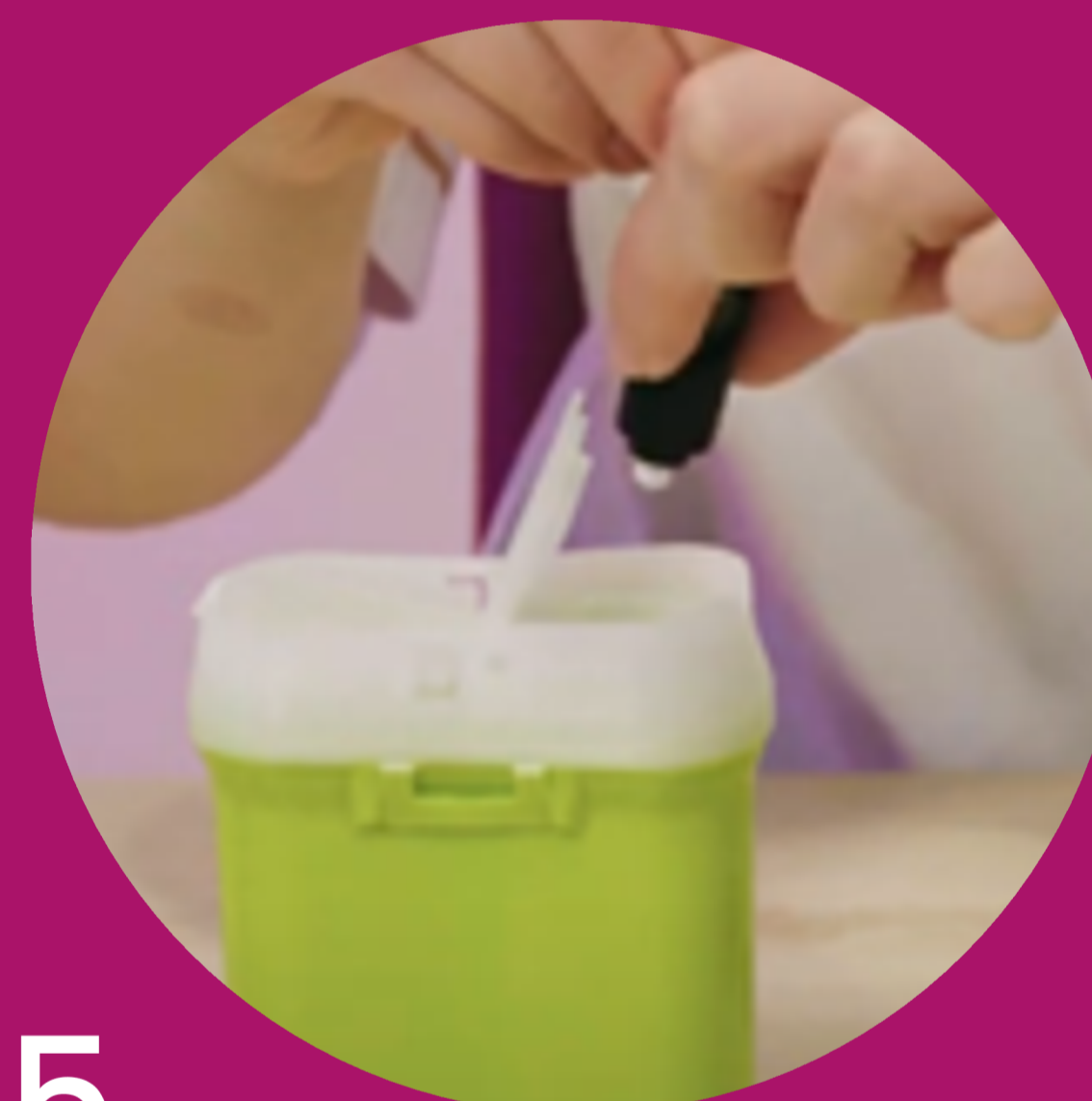

15

Na de meting verwijdert u de dop van de prikpen om daarna de naald te verwijderen. Doe de naald in de naaldencontainer.



16

Verwijder de teststrip uit de meter door het knopje aan de zijkant in te drukken en doe deze in de naaldencontainer.